



ZIPPIE VOYAGE

BOUGER ENSEMBLE,
GRANDIR ENSEMBLE



ZIPPIE voyage



MODERNE, SIMPLE D'UTILISATION, CE QU'IL Y A DE MEILLEUR POUR VOTRE ENFANT



La poussette Zippie Voyage allie l'expertise du Baby Jogger au système d'assise pour enfant multifonctionnel de Zippie !

Le résultat est une poussette intuitive, facile à utiliser et sans compromis pour offrir le meilleur à votre enfant.

// BARRE-POUSSOIR TÉLESCOPIQUE AJUSTABLE

La barre-poussoir à hauteur facilement ajustable vous permet de pousser la poussette d'une seule main.

// FREIN DE STATIONNEMENT MANUEL ET RAPIDEMENT ACCESSIBLE

Contrôle accru grâce au levier aisément accessible qui vous permet d'actionner le frein de la poussette sans difficulté.

// MÉCANISME BREVETÉ QUICK-FOLD

Pliable de façon très compacte grâce au mécanisme révolutionnaire Quick-Fold.



// PARE-SOLEIL AVEC FENÊTRE D'OBSERVATION


Veillez à ce que votre petit bout reste à l'ombre lorsque le soleil brille. La fenêtre d'observation vous permet de le tenir à l'œil.

// VASTE ESPACE DE RANGEMENT

Placez facilement 7 kg de bagages dans le filet prévu à cet effet.

// ROUES PIVOTANTES À SUSPENSION AVEC MÉCANISME DE BLOCAGE

Franchissez ou contournez les obstacles pendant que votre enfant est paisiblement et confortablement assis dans la poussette en toute sécurité. La fonction pivotante des roues peut être désactivée lors des longues promenades en ligne droite pour un confort de poussée optimisé.

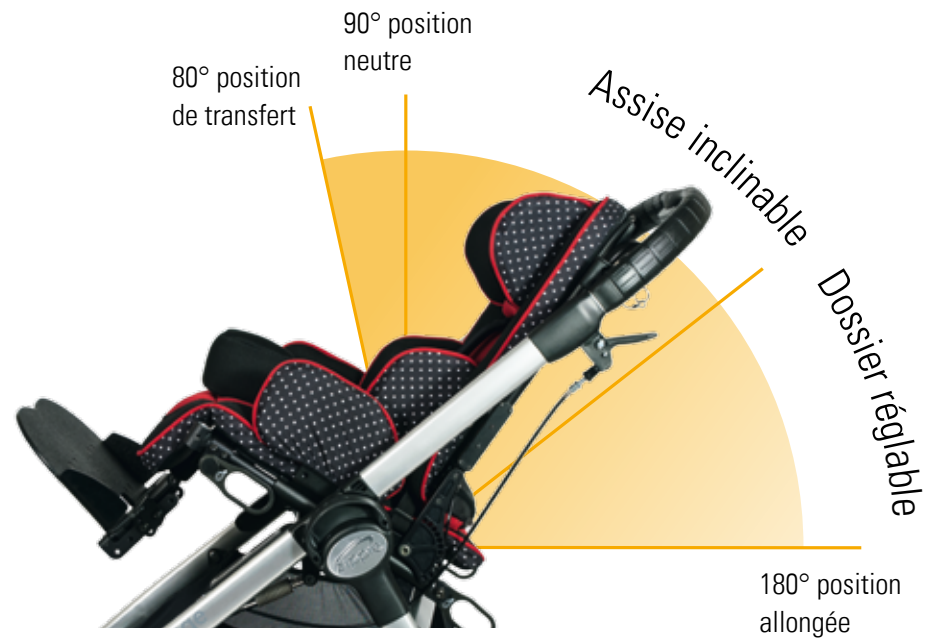

// INCLINAISON DU SIÈGE ET DU DOSSIER FACILEMENT AJUSTABLE

Régler correctement le siège et le dossier améliore la position de l'enfant, facilite la prise des repas, favorise les fonctions digestives et respiratoires et ouvre le champ visuel. Inclinez le siège (jusqu'à 35°) et le dossier (jusqu'à 180°) de la poussette en toute simplicité, en actionnant le levier situé derrière le dossier.

UN SYSTÈME D'ASSISE ÉVOLUTIF POUR LES ENFANTS !

La poussette qui anticipe, offre des solutions et ouvre toutes les portes à une famille qui s'agrandit. La poussette Zippie Voyage garantit un soutien d'assise adapté à votre enfant, des premiers mois à la petite enfance, grâce à son système d'assise évolutif et aux nombreux accessoires de positionnement disponibles.

// CEINTURE DE MAINTIEN JAY

// SELLE D'ABDUCTION

// REPOSE-PIED

Hauteur et inclinaison réglables avec fixe-pieds ou cale-pieds en option

// APPUIE-TÊTE

// HARNAIS DE POITRINE JAY

// DOSSIER
Hauteur réglable

// SUPPORT LATÉRAL
Largeur réglable

// SUPPORTS DE HANCHES
Largeur réglable

// SIÈGE
Profondeur et hauteur réglables





// MÉCANISME BREVETÉ QUICK-FOLD

Pliable de façon très compacte grâce au mécanisme révolutionnaire Quick-Fold.

Le châssis plié est parfaitement équilibré et par conséquent facile à soulever.



La poussette Zippie Voyage a réussi le crash test selon la norme ISO 7176-19 avec un système d'arrimage en quatre points.

SIMPLE À MANIPULER, IDÉALE POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE

Le siège se fixe au châssis en deux temps trois mouvements.
Le transport de la poussette est dès lors d'une grande simplicité.
Elle peut même être placée dans les véhicules de petite dimension.



// ORIENTATION FACILEMENT ADAPTABLE

Adaptez aisément l'orientation du siège, face à vous ou face à la route pour découvrir le monde.

// DISPOSITIF DE FIXATION DE SIÈGE SLIDE-N-LOCK

Installer et retirer le siège est très simple grâce au dispositif de fixation SLIDE-N-LOCK. Les rails permettent de placer le siège dans une position correcte et un clic audible vous indique que le siège a été fixé correctement.



LA VIE EST PLEINE DE COULEURS !

La poussette Zippie Voyage, c'est un design moderne assorti d'un choix de quatre coloris différents pour compléter le tout.





// CHÂSSIS JCM À HAUTEUR RÉGLABLE

Le châssis à hauteur réglable de JCM permet à votre enfant de participer à toutes les activités. À table ou sur le sol, l'enfant bénéficie de tous les avantages d'un soutien d'assise optimal.





ACCESSOIRES

Les nombreux accessoires et options du Zippie Voyage vous offrent la flexibilité nécessaire à la simplification des tâches quotidiennes.



// PLANCHE À ROULETTES POUR SECOND ENFANT

Cette planche à roulettes est un bon mode de transport conçu pour les enfants jusqu'à 20 kg. Elle se fixe facilement sur l'axe arrière de la poussette et est antidérapante pour une sécurité accrue.



// PORTE-GOBELET

Pour emporter une bouteille d'eau ou un gobelet de café. Le porte-gobelet restera toujours en position horizontale afin d'éviter les taches.



// BARRE DE MAINTIEN

La barre de maintien permet à votre enfant de se tenir confortablement et en toute sécurité lors de la promenade.



// TABLETTE

La tablette est disponible en gris ou en plexiglas (tablette transparente). La hauteur et la profondeur des deux variantes sont réglables.



// CROCHET DE SUSPENSION

Ce crochet vous permet de suspendre aisément plusieurs sacs à la barre-poussoir. Très simple à fixer au moyen d'une bande velcro.



// TABLETTE HORIZONTALE SOUS LE CHÂSSIS

Cette tablette horizontale vous donne par exemple la possibilité de fixer des dispositifs médicaux en toute sécurité. La charge maximale autorisée est de 23 kg.



// TABLETTE HORIZONTALE INFÉRIEURE À L'AVANT

Cette tablette vous offre la possibilité de fixer en toute sécurité du matériel devant être rapidement accessible.



// FIXE-PIEDS

Une fixation adaptée des pieds garantit une amélioration de la posture générale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ZIPPIE VOYAGE

Poids maximal utilisateur :	34 kg	Rayon de braquage :	1 100 mm
Largeur d'assise :	155 – 300 mm* (hors habillage)	Pente maximale :	9° (pour utilisation des freins de stationnement)
Profondeur d'assise :	200 – 340 mm (hors habillage)	Roue arrière :	12,5" air avec inserts sans air
Longueur de la jambe inférieure :	155 – 310 mm	Roue avant :	7"
Hauteur de dossier :	410 – 610 mm (hors habillage)	Poids du siège :	6 kg
Inclinaison du dossier :	100° (de 80° à 180°)	Poids de la base :	12 kg
Inclinaison d'assise :	35° (de -5° à 30°)	Éléments amovibles :	Siège et roues – seulement pour le transport
Hauteur d'assise :	590 – 660 mm (3 positions possibles : 590/620/660 mm)	4 coloris :	Bleu, rouge, beige, gris
Largeur totale :	630 mm	Matériau de châssis :	Aluminium
Longueur totale :	1 100 mm	Crash test :	•
Hauteur totale :	980 – 1 050 mm	Transport :	Fixez correctement le produit
Longueur totale de la poussette repliée :	800 mm		
Hauteur totale de la poussette repliée :	370 mm		

Pour de plus amples informations relatives aux spécifications, options et accessoires, veuillez consulter le formulaire de commande. Toutes les informations sont sous réserve de fautes de frappe et de modifications techniques et peuvent être modifiées sans préavis. La poussette Zippie Voyage a réussi le crash test selon la norme ISO 7176-19.

* Largeur d'assise 155 mm - 240 mm uniquement possible en utilisant les réducteurs.



www.SunriseMedical.be